

LoFric – voor mannen

LoFric®, hydrofiele urinekatheter voor eenmalig gebruik.

Voor kort- en langdurend blaasmanagement middels intermitterende katheterisatie via de plasbuis.

LoFric katheters zijn alleen voor gebruik op recept.


Zorg ervoor dat u tijdens het gebruik het advies en de training voor de katheterisatieprocedure van uw zorgverlener opvolgt.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing op de verpakking voor belangrijke informatie en volledige instructies.

Neem contact op met uw voorschrijver als u problemen ondervindt.

Gebruiksaanwijzing

1. Was vóór de katheterisatie uw handen met water en zeep.
2. Trek de uiteinden van de katheterverpakking ongeveer 5 cm uit elkaar.
3. Vul de verpakking thuis met schoon water uit de kraan en in het ziekenhuis met steriel water of een zoutoplossing. Laat vóór gebruik het water 30 seconden op de katheter inwerken.
4. Verwijder de sticker en gebruik de zelfklevende strip op de achterzijde om het product aan een droog oppervlak te bevestigen, zodat u zich kunt voorbereiden op de katheterisatie.
5. Haal de katheter uit de verpakking.
6. Til de penis op in de richting van de buik. Breng langzaam de katheter in de plasbuis in zonder de katheterbuis aan te raken. Wanneer de urine begint te stromen, duwt u de katheter iets verder zodat de beide katheterogen zich in de blaas bevinden.
7. Buig de penis naar beneden wanneer de urine door de katheter begint te stromen.
8. Wanneer de urine niet meer stroomt, trekt u de katheter een klein stukje terug. Als de urine weer begint te stromen, wacht u met het terugtrekken totdat er geen urine meer uit de katheter komt. Zo bent u er zeker van dat de blaas helemaal leeg is. Vervolgens verwijdert u de katheter uit de plasbuis.
9. Plaats de katheter terug in de verpakking en gooi het op de juiste manier weg. Let op: plaatselijke voorschriften kunnen variëren.

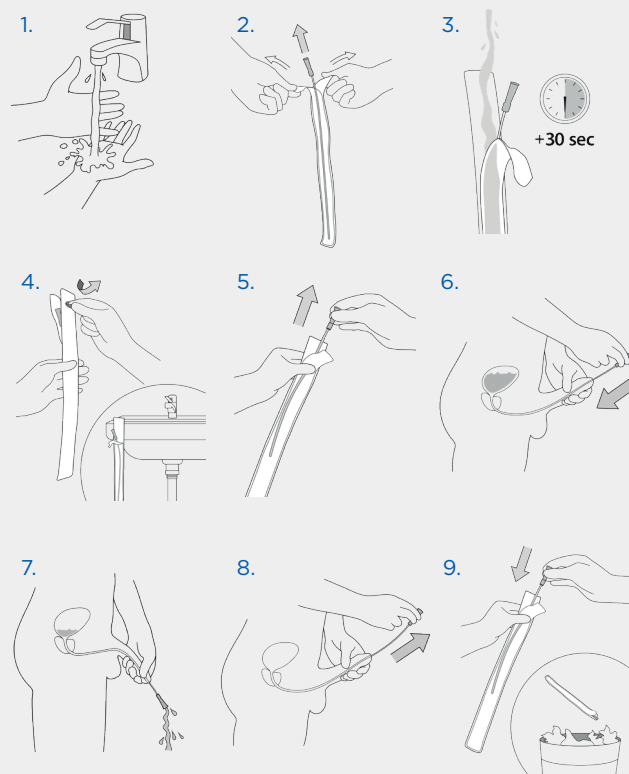


Speciale instructie voor Tiemann katheter, met licht gebogen tip.

Voor het gebruik van een Tiemann katheter is een speciale techniek nodig. Overleg met uw zorgverlener voor training en advies.

1. Stel vast waar de markering zich op de conus bevindt ten opzichte van de gebogen kathetertip voordat de katheter wordt ingebracht. Gebruik die markering als referentie om de gebogen tip tijdens het gebruik van de katheter in de juiste richting te houden.
2. Houd tijdens het inbrengen van de katheter en tijdens de katheterisatie de gebogen tip naar boven gericht in de richting van de buik, alsook tijdens het terugtrekken van de katheter. Of volg de specifieke instructies van uw zorgverlener.

N.B. Gebruikte katheters mogen niet worden weggegooid met huishoudelijk plastic afval, omdat de katheter resten urine bevat. Indien de gebruikte katheter niet wordt teruggeplaatst in de verpakking, mag die verpakking wel met het huishoudelijk plastic afval worden weggegooid. Een gebruikte katheter moet bij het restafval worden afgevoerd.

Tiemann

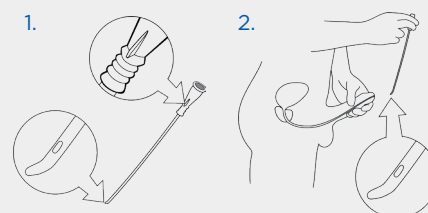

Bij Wellspect ontwikkelen we innovatieve oplossingen voor continentiezorg die de kwaliteit van leven verbetert van mensen met blaas- en darmproblemen. Gebruikers kunnen weer zelfvertrouwen en onafhankelijkheid opbouwen, evenals een goede gezondheid en welzijn ervaren. Al meer dan 40 jaar zijn wij toonaangevend in de sector met onze productmerken LoFric® en Navina™. Wij streven er altijd naar om de impact van onze producten op het milieu tot een minimum te beperken en op termijn klimaatneutraal te worden. Door samen te blijven werken met gebruikers en zorgverleners kunnen we klinische resultaten op een duurzame manier verbeteren, nu en in de toekomst.

Wellspect. **A Real Difference.**

Kijk voor meer informatie over onze producten en diensten op Wellspect.nl.

wellspect.nl

Wellspect BV, Signaalrood 55, 2718 SG, Zoetermeer, Nederland

Tel. NL: +31 79 363 70 10. Fax NL: +31 79 362 37 48. www.wellspect.nl

